



BD Microlance™ 3

Aiguilles hypodermiques
Stérile, usage unique, sans latex



Classe IIa selon la directive européenne 93/42/CEE
sur les dispositifs médicaux

Marquage CE

Réf. 300637, 304622, 301700, 301500, 300400, 300600,
300300, 304300, 300635, 300094, 301155, 304000, 300149,
300774, 300779, 301750, 300780.

Selon la directive européenne 93/42/CEE
(procédure de conformité annexe V et VII)

• **Certificat** : n° 95 Q252.157

Certificat n° 98 Q252.308 pour les réf. 300774, 300779 et
300780

Certifiés par NSAI (n° 0050)

• **Fabricant** : Becton Dickinson, Drogheda, Irlande et
Becton Dickinson, Columbus, USA pour réf. 300774,
300779 et 300780

• **Certification** :

Drogheda : I.S. EN ISO 9001 : 2000 ; Certificat n° 19.1609
certifié par NSAI

Columbus : I.S. EN ISO 13488 : 2000 et ISO 9002 : 1994 ;
Certificat n° MD 19.2143 certifié par NSAI ; pour les réf.
300774, 300779 et 300780

- **Stérilisation** : Oxyde d'éthylène (ETO),
Rayon Gamma pour les réf. 300779 et 300780
- **Péremption** : 5 ans après stérilisation

Marquage CE

Réf. 304432, 304827, 301300, 301156, 304727, 300900,
301000, 300800, 300700.

Selon la directive européenne 93/42/CEE
(procédure de conformité annexe V)

• **Certificat** : n° 1995 06 0006 CP

Certifié par Dirección general de farmacia y productos
sanitarios (n° 0318)

• **Fabricant** : Becton Dickinson, Fraga, Espagne

• **Certification** : UNE-EN ISO 9001 : 2000

Certificat n° ER-0097/1994 certifié par AENOR

• **Stérilisation** : Oxyde d'éthylène (ETO)

• **Péremption** : 5 ans après stérilisation

Indications

Aiguilles hypodermiques stériles, à usage unique, utilisées
pour des procédures d'injection (ex. : injection
intradermique, sous-cutanée, intra-musculaire et
intraveineuse) et/ou pour l'aspiration des fluides médicaux.


Composition des différents éléments :

- Embase et protecteur de l'aiguille : Polypropylène (PP)
- Aiguille : Acier inoxydable (contient 9 à 9,75 % de Nickel et
18 à 19 % de Chrome)
- Fixation canule/embase : Résine Epoxy
- Lubrifiant : Huile de silicone
- Emballage individuel : Papier non enduit de 60g/m²,
Film transparent thermoformé en Polyéthylène (PE) /
Polyamide (PA)
- Encres de marquage
- Filtre de l'aiguille pour la réf. 300774 : Versapor 5000

BD Microlance™ 3 - Aiguilles hypodermiques- Stérile, usage unique, sans latex

Caractéristiques Générales :

- Biseau : la conception du biseau fait appel aux technologies de pointe (triple biseau). Les études in vitro et in vivo ont démontré une supériorité qualitative de l'indice de pénétration.
- Parois minces : elles autorisent l'utilisation d'aiguilles plus fines ;
l'augmentation de la lumière améliore le débit durant les temps d'injection ou de prélèvement.
- Les aiguilles BD Microlance™ 3 s'adaptent sur un cône Luer ou Luer Lock. Cônes et couleurs conformes aux normes AFNOR/ISO.

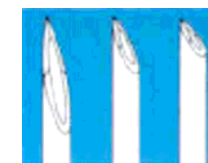

- 1) Biseau normal
- 2) Biseau court
- 3) Biseau intradermique

Références	Origine	Code Couleur	Gauge	Longueur (inch)	Longueur (mm)	Ø externe (mm)	Ø interne (mm)	Paroi	Biseau
300637	IRL	Blanc	16	1 ½	40	1.638	1.155	Normale	Normal
304622	IRL	Rose	18	1 ½	40	1.257	0.927	Mince	Court
301700	IRL	Crème	19	1	25	1.067	0.749	Mince	Normal
301500	IRL	Crème	19	1 ½	40	1.067	0.749	Mince	Normal
301750	IRL	Crème	19	2	50	1.067	0.749	Mince	Normal
304827	ESP	Jaune	20	1	25	0.902	0.635	Mince	Normal
301300	ESP	Jaune	20	1 ½	40	0.902	0.635	Mince	Normal
301156	ESP	Vert	21	1	25	0.813	0.546	Mince	Normal
304432	ESP	Vert	21	1 ½	40	0.813	0.546	Mince	Normal
301155	IRL	Vert	21	2	50	0.813	0.495	Normale	Normal
304434	IRL	Vert	21	5/8	16	0.813	0.495	Normale	Normal
304727	ESP	Noir	22	1	25	0.711	0.445	Mince	Normal
300900	ESP	Noir	22	1 ¼	30	0.711	0.445	Mince	Normal
301000	ESP	Noir	22	1 ½	40	0.711	0.445	Mince	Normal
300094	IRL	Noir	22	2	50	0.711	0.394	Normale	Normal
300800	ESP	Bleu	23	1	25	0.635	0.318	Normale	Normal
300700	ESP	Bleu	23	1 ¼	30	0.635	0.318	Normale	Normal
300400	IRL	Orange	25	1	25	0.508	0.241	Normale	Intradermique
300600	IRL	Orange	25	5/8	16	0.508	0.241	Normale	Normal
300300	IRL	Brun	26	3/8	10	0.457	0.241	Normale	Normal
304300	IRL	Brun	26	5/8	16	0.457	0.241	Normale	Normal
300635	IRL	Gris	27	½	13	0.406	0.191	Normale	Normal
302200	IRL	Gris	27	¾	19	0.406	0.191	Normale	Normal
304000	IRL	Jaune	30	½	13	0.305	0.140	Normale	Normal
300149	IRL	-	18	1 ½	40	1.257	0.927	Mince	"Blunt Needle" sans biseau
300774	USA	-	19	1 ½	40	1.067	0.749	Mince	Aiguille à filter 5µ
300779	USA	-	18	1 ½	40	1.257	0.927	Mince	Aiguille perce-bouchon "NOKOR
300780	USA	-	16	1	25	1.638	1.282	Mince	ADMIX" biseau lame

Conditionnement :

Boîte carton / Suremballage carton / Palette filmée

Réf. 300094, 301155 et 301750 : 100/4000/32000 unités

Réf. 300779, 300774 et 300780 : 100/1000 unités

Toutes les autres réf. : 100/5000/40000 unités



BD Medical
Medical Surgical Systems
11, rue Aristide-Bergès
38800 Le Pont-de-Claix
Tél. 04 76 68 36 36
Fax 04 76 68 55 61
www.bd.com/france

Becton Dickinson, S.A.
Ctra Mequinenza , s/n.
22520 Fraga (Huesca) España
Tel: 34 974.470900
Fax: 34 974.470546



DECLARATION OF CONFORMITY

We BECTON DICKINSON S.A. Ctra. Mequinenza s/n, 22520 FRAGA (SPAIN) declare under our sole responsibility that the product

Microlance™ 3 Sterile Needles

to which this certificate relates, is in conformity with the

Medical Device Directive 93/42/EEC
(June 14th, 1993)



BECTON DICKINSON S.A.
Ctra. Mequinenza, s/n
22520 FRAGA (Huesca) - Spain
Tel. 974 47 09 00

MIGUEL NOGUES
Quality Assurance Mgr.

Fraga; December 7, 2004